


LAB SILICONES

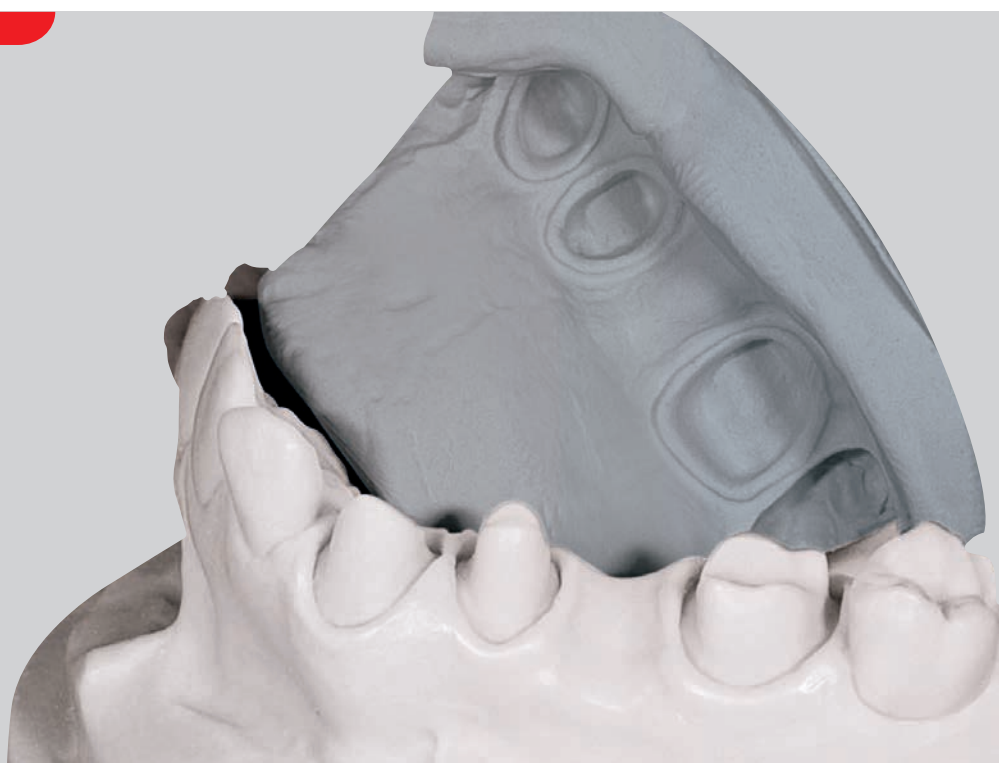

Simplify your work

LAB SILICONES SOLUTIONS, полная гамма зуботехнических силиконов, созданная для упрощения зубопротезной техники и включающая в себя материалы **ZETALABOR**, **TITANIUM**, **PLATINUM 85**, **PLATINUM 95** и **ELITE TRANSPARENT**.

ZETALABOR

Самый используемый
зуботехнический силикон в мире.

ZETALABOR - это первый C-силикон исключительно для лабораторного применения, призванный значительно упростить работу зубного техника.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Контрольные матрицы для проектирования металлической структуры
- Матрицы при работе с пластмассой в комбинированном протезе
- Матрицы для изготовления временных протезов
- Матрицы при создании искусственной десны на модели
- Изоляция зубов/гипса в муфеле

ОТЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- **Высокая начальная текучесть**
- **Конечная твёрдость** (85 по Шору А)
- **Термостойкость** (140°C)
- Высокая **точность воспроизведения деталей**
- Высокая **прочность**



Контрольная матрица для проектирования металлической структуры



Матрица из ZETALABOR с каналами для инъектирования

TITANIUM

Несравнимая твёрдость.

Особая формула, включающая в себя производные титана, придаёт С-силикону **высокую точность, твёрдость и термостойкость.**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Контрольные матрицы для проектирования металлической структуры
- Матрицы при работе с пластмассой в комбинированном протезе
- Матрицы для изготовления временных протезов
- Матрицы при создании искусственной десны на модели
- Изоляция зубов/гипса в муфеле

КАЧЕСТВА ЧЕМПИОНА

- **Высокая начальная пластичность**
- **Конечная твёрдость** (95 по Шору А)
- **Термостойкость** (180°C)
- Высокая **точность воспроизведения деталей**



Починка съёмных протезов



Матрицы для изготовления временных протезов

PLATINUM 85

Высочайшая стабильность.

A-силикон для зуботехнических работ, обладающий **высокой точностью** и **идеальной прочностью**.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Контр-оттиск в полном протезе
- Контрольные матрицы для проектирования металлической структуры
- Поддержка для работы с эстетическими материалами, не содержащими металла
- Матрицы при работе с пластмассой в комбинированном протезе
- Изоляция зубов/гипса в муфеле

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- **Биосовместимость**
- Высокая начальная **пластичность**
- Высочайшая **термостойкость** (свыше 200°C)
- Отличное **воспроизведение деталей**
- Минимальная **усадка** после 24 часов (-0,058%)
- Отсутствие деформации в муфеле
- Высокая **конечная твёрдость** (85 по Шору А)



Контрольная матрица для создания металлической структуры

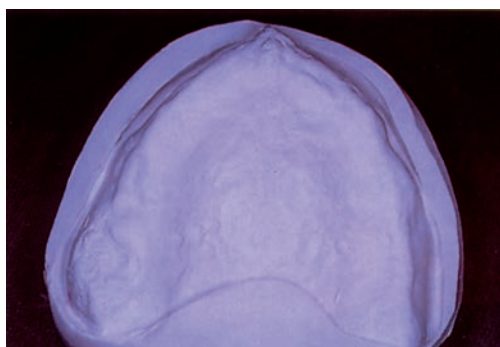

Контр-оттиск в полном протезе

PLATINUM 95

Необыкновенная твёрдость.

A-силикон для зуботехнических работ, позволяющий получить необыкновенные результаты при максимальной **простоте применения**.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работа с керамикой на вертикуляторе
- Контр-оттиск в полном протезе
- Контрольные матрицы для проектирования металлической структуры
- Починка съёмных протезов
- Ключи регистрации окклюзии при работе с артикулятором
- Дублирование при изготовлении полного протеза
- Матрицы для изготовления временных протезов
- Базовая поддержка для работы со светоотверждаемыми композитными пластмассами
- Изоляция зубов/гипса в муфеле

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- **Биосовместимость**
- Высокая начальная **пластичность**
- Высокая **конечная твёрдость** (95 по Шору А)
- Высочайшая **стабильность размеров**
- Высочайшая **термостойкость** (свыше 200°C)
- Отличное **воспроизведение деталей**
- Отсутствие деформации в муфеле



Работа с керамикой на вертикуляторе

ELITE TRANSPARENT

Абсолютная прозрачность.

Прозрачный А-силикон **высокой текучести, с точностью** отображающий детали для последующего их воссоздания из светотверждаемого композита.

УЛУЧШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Высочайшая **текучесть**
- Высокая степень **прозрачности**
- Светоотверждение при отсутствии кислорода
- **Высокая степень твёрдости** приводит к полному отсутствию деформации
- **Точное воспроизведение** деталей для последующего воспроизведения в композите
- **Конечная твёрдость** (72 по Шору А)



Высокая текучесть ELITE TRANSPARENT при нанесении



Высокая степень прозрачности



Идеальная твёрдость для применения композита без создания деформации



Конечный результат: компактная поверхность конечного продукта из композита в сравнении с традиционными работами из светотверждаемых пластмасс



lab silicones solutions

Вы в хороших руках.

Zhermack 
Dental

LAB SILICONES



ВИДЫ УПАКОВКИ

C400791 ZETALABOR	1 банка 900 г Базы + мерная ложка
C400790 ZETALABOR	1 банка 2,6 кг + мерная ложка
C400798 ZETALABOR	1 банка 5 кг + мерная ложка + 2 тубика геля Indurent 60 мл
C400811 ZETALABOR	1 банка 5 кг + мерная ложка
C400804 ZETALABOR	1 банка 10 кг + мерная ложка
C400812 ZETALABOR	1 банка 25 кг + мерная ложка
C400605 TITANIUM	1 банка 2,6 кг + мерная ложка
C400818 TITANIUM	1 банка 5 кг + мерная ложка + 2 тубика геля Indurent 60 мл
C400611 TITANIUM	1 банка 5 кг + мерная ложка
C400727 PLATINUM (85 Shore A)	1 банка 450 г Базы + 450 г Катализатора
C400725 PLATINUM (85 Shore A)	1 банка 1 кг Базы + 1 кг Катализатора
C400723 PLATINUM (85 Shore A)	1 банка 5 кг Базы + 5 кг Катализатора
C400720 PLATINUM (95 Shore A)	1 банка 450 г Базы + 450 г Катализатора
C400700 PLATINUM (95 Shore A)	1 банка 1 кг Базы + 1 кг Катализатора
C400710 PLATINUM (95 Shore A)	1 банка 5 кг Базы + 5 кг Катализатора
C401600 ELITE TRANSPARENT	1 картридж 50 мл + 6 наконечников

Аксессуары ZETALABOR - TITANIUM

C100700 INDURENT GEL	1 тубик 60 мл
----------------------	---------------

Аксессуары ELITE TRANSPARENT

C202100 DISPENSER D2	диспенсер D2 - 1:1
C207203 TRILHO	зубчатая рейка для диспенсера D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL	48 жёлтых смешивательных наконечников

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermpol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermpol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com